



2022

SOLUZIONI SENZA CONFINI

PROMOZIONI
APRILE | SETTEMBRE



SPECIALE SOLUZIONI SENZA CONFINI

- 04 Handy Surgery
- 12 Riunito odontoiatrico Over
- 16 Sala sterilizzazione Sterinox

APPARECCHIATURE STERILIZZAZIONE

- 18 Sistema gestione tracciamento SGT
- 19 Etichettatrice automatica
- 19 Termosigillatrice
- 19 Promo Vasca ultrasuoni
- 20 Autoclave

DISPOSITIVO ANTI AEROSOL

- 21 Dispositivo di protezione da aerosol SKUDO

ILLUMINAZIONE

- 22 Lampade scialitiche chirurgiche SURGICAL multiLED Line
- 23 Lampade scialitiche Esa Line

COMUNICAZIONE & DIAGNOSTICA

- 24 Scanner Intraorale 3D
- 26 Sensore RVG
- 26 Scanner ai fosfori
- 27 Radiografici endorali
- 28 Telecamere intraorali
- 28 PC touchscreen
- 28 Monitor sanificabili

CARRELLI ELETTRIFICATI

- 29 Carrelli porta apparecchiature Easy Tray

CHIRURGIA & ENDODONZIA

- 30 Micromotore endodontico Endo Smart Plus
- 31 Micromotori per implantologia
- 31 Micromotore endodontico Endo Smart
- 31 Rilevatore apicale

STRUMENTAZIONE ROTANTE

- 32 Turbine
- 34 Contrangoli
- 33 Testine per angoli
- 34 Attacchi per turbine
- 35 Promo kit convenienza manipoli odontoiatrici

IGIENE ORALE

- 36 Ablatore parodontale PT MASTER 3
- 37 **NOVITÀ** Inserti per ablatore parodontale
- 38 Ablatori da banco
- 39 Kit manipoli ablatore
- 40 Inserti per ablatori

RICOSTRUZIONE

- 41 Lampade polimerizzatrici

DISINFEZIONE AMBIENTE

- 42 Sterilizzatori d'aria Steril Fan
- 43 Nebulizzatori Flower Clean

SALA MACCHINE

- 44 Sistemi di aspirazione centralizzati
- 45 Compressori medicali

D A OLTRE 30 ANNI AL SERVIZIO DEL PROFESSIONISTA

Tecnomed Italia sta puntando sempre più sulla ricerca e sulla qualità del Made in Italy, sottraendosi dalla logica voluta da alcuni mercati esteri che propongono prezzi strabilianti in cambio di prodotti di dubbia qualità e resistenza nel tempo.

In questo modo possiamo offrirvi soluzioni innovative, personalizzate, durevoli e al giusto prezzo, con la **garanzia che dietro al prodotto venduto ci sia la produzione italiana di Tecnomed Italia**, un'azienda solida nel mercato medicale da oltre 30 anni.

La nostra azienda progetta, sviluppa, produce e certifica le più innovative soluzioni professionali per studi Medici, Medici Veterinari e Professionisti del Settore Estetico.

Gli elementi della linea **Handy Surgery Inox Line** e **Soft Line**, di **Sterinox**, il riunito **Over** - per citarne alcuni - **sono unici nel loro genere** perchè sono stati **disegnati e progettati da Tecnomed Italia**.

I cordoni con tecnologia Safety Handpieces (brevetto n. AN2013A000045 / n. EP14157497.0), **SKUDO** (brevetto n. 10202000008218) e **FALKO** l'innovativo prodotto che stiamo presentando (brevetto depositato n. 102022000007703 / n. 102022000007700), **sono di esclusiva inventiva di Tecnomed Italia**.

Le proposte Tecnomed sono completamente configurabili e customizzabili per ogni esigenza del Professionista, dalle dimensioni dello studio alle performance ricercate, **con grande attenzione al budget a disposizione**.



Post vendita garantito

Tecnomed Italia si prende cura dei propri clienti anche nella fase successiva all'acquisto, tramite la nostra rete di centri di assistenza tecnica.

Abbiamo attentamente selezionato e formato nel corso degli anni strutture e professionisti con le quali collaborare, per gestire al meglio tutti gli aspetti legati al post vendita e ai servizi.

Questi centri di assistenza si occuperanno di tutte le attività come: supporto, montaggio, riparazioni, sostituzioni e molto altro.



TECNOMED ITALIA SOSTIENE IL PROGETTO

"Prima le mamme e i bambini - 1.000 di questi giorni" del CUAMM Medici con l'Africa

In Africa ogni anno 250.000 donne muoiono a causa del parto. I bambini che perdono la vita nel primo mese sono 1.2 milioni e, tra quelli che sopravvivono 1 su 3 soffre di malnutrizione. La missione è stare con i più poveri, quelli che "non contano" come mamme e bambini. Con questo programma si vuol indicare una priorità e anche un'evidenza: se prima si curano le mamme e i bambini, poi si avranno adulti sani, in grado di provvedere a se stessi, alla propria famiglia e a tutta la comunità. L'impegno si è concentrato sul garantire alle future mamme un parto assistito e sicuro: tramite il servizio di trasporto gratuito son state messe in condizione di raggiungere le strutture sanitarie più vicine per effettuare le visite prenatali e per poi partorire in strutture adeguate con il sostegno di personale qualificato.



"Agire sui bambini significa predire un futuro di adulti sorridenti e sani. Ho voluto fortemente che al progetto di prevenzione se ne affiancasse uno di sostegno a chi invece il sorriso viene tolto a causa della povertà in cui vive. È impensabile che nel 2020 ci siano donne che muoiono per partorire perché non possono essere ospedalizzate, o bambini a cui non vengono diagnosticate patologie prenatali che nelle nostre realtà richiederebbero cure banali, ma precoci! Da qui nasce questo ambizioso progetto. Ho pensato allora di creare un libro il più completo possibile con foto e approfondimenti che mi supportasse in questa informazione di salute orale pediatrica che ritengo tanto importante quanto poco diffusa. Una lettura che spero possa essere di aiuto per i pazienti e per il professionista."

Chiara Fabrizi

Igienista Dentale | Autrice del libro "Il sorriso del mio bambino"

www.ilsorrisodelmiobambino.it

€
9,90 + IVA

Il libro è acquistabile anche tramite Tecnomed Italia

Codice ordine:
9788831361699

APPROFONDISCI

CONFIGURA



HANDY SURGERY

INOX LINE

Orgoglio italiano

Il design delle linea Handy Surgery Inox Line è unico al mondo; ogni elemento è stato disegnato e progettato da Tecnomed Italia, in collaborazione con i migliori chirurghi maxillofacciali.

Inox Line è l'ideale per studi medici avanzati che offrono un'ampia scelta di servizi e comfort ai propri pazienti: dall'odontoiatria alla chirurgia estetica, passando per visite ed interventi dermatologici, ginecologici e otorinolaringoiatrici.

Le attrezzature a scomparsa e la linearità degli arredi, rendono Inox Line versatile e professionale, pronta a trasformarsi velocemente per soddisfare le varie discipline, di passare dunque da uno studio odontoiatrico di ultima generazione ad una vera e propria sala chirurgica. L'acciaio Inox utilizzato per tutta la linea facilita la pulizia, elevando al massimo gli standard igienici, ed è sinonimo di linearità e robustezza mai visti prima.

Le proposte Tecnomed sono completamente configurabili e customizzabili per ogni esigenza del Professionista, dalle dimensioni dello studio alle performance ricercate, con grande attenzione al budget a disposizione.



PACCHETTO CENTRO STUDIO

HANDY SURGERY *inox*

L'offerta comprende:

- **POLTRONA MORPHEUS INOX COD.DE1000X**
4 motori, funzioni trendelenburg, manuali
2 joystick movimetri poltrona
Pulsantiera 10 funzioni
Poggiatesta con doppia articolazione
Basamento con piedini fissi
Struttura inox
Imbottitura standard, colore tappezzeria a scelta
- **CARRELLO MAYCART INOX COD.DE1001X**
Pannello impostazione strumenti lcd
Siringa Luzzani acciaio Minimate angolare
Micromotore ad induzione LED
Cordone per turbina 4 vie, safety handpiece
Dispositivo antireflusso
Bottiglia spray strumenti 1 litro
Pedale progressivo Feed Fec
Carrello inox Mayo con pompa oleodinamica
Maniglia destra di movimentazione
Supporti strumenti autoclavabili
Centralina alimentazione 24/230 VAC
- **ASPIRATORE CHIRURGICO ASPIROL INOX COD.DE1002X**
2 supporti cannule autoclavabili
Cannula aspirasaliva e cannula aspiratore chirurgico
Bacinella in ceramica ruotabile 180° e sfilabile
- **SEGGIOLINO BEAUTY + SEGGIOLINO ROUND IN OMAGGIO**

€ 24.375,00

€ 16.430,00

€ 1.030,20



LA TESTIMONIANZA DI CHI HA SCELTO

TECNOMED ITALIA



"Grazie alle soluzioni offerte dalla linea Handy Surgery siamo riusciti ad adibire uno studio odontoiatrico ad attività adiacenti all'odontoiatria. La versatilità dell'intera linea permette di svolgere attività multidisciplinari: abbiamo quindi riscontrato un vantaggio significativo rispetto all'utilizzo di un riunito dentale tradizionale.

Ciò che ci ha colpito maggiormente è stata l'essenzialità dello studio e la rapidità nel trasformarsi ed essere pronto velocemente a soddisfare le varie discipline; di passare dunque da uno studio odontoiatrico di ultima generazione ad una vera e propria sala chirurgica."

DR. ALESSANDRO BUTI
MEDICO CHIRURGO ODONTOIATRA - FIRENZE

SOLUZIONE CHIRURGIA HANDY SURGERY *inox*

CONFIGURA

SCOPRI LE INFINITE VARIANTI SU:
WWW.TECNOMEDITALIA.COM

CERCHI UNA SOLUZIONE CUSTOM? INVIACI LA TUA RICHIESTA!
WWW.TECNOMEDITALIA.COM/COMMERCIALE

MOBILE PER MAYCART

Mobile Inox 1500x650x1020(h) mm con 2 ante comprensivo di modulo cassetiera 7 cassetti.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: HSX02

€ 5.534,00
€ 3.830,00

CARRELLO EASY TRAY

Carrello porta apparecchiature Easy Tray, in acciaio inox, elettrificato, con 5 tray e asta porta flebo.

CODICE: OF1003X.00

€ 1.626,00
€ 1.025,00

€ 8.699,00
€ 6.220,00

CARRELLO MAYCART

Carrello chirurgico Maycart in acciaio inox. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

CODICE: DE1001X

LAMPADA ESACAM A SOFFITTO

Lampada EsaCam composta da: videocamera 30X, autofocus, braccio pantografo. Versione applicazione a soffitto per altezza da 2,7 a 3,2 metri.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: HSX01

€ 7.281,00
€ 4.620,00

MOBILE MATRIX COMPLETO

Mobile Inox 1500x650x1020(h) mm composto da modulo antenna 2 ripiani interni in vetro e 2 moduli cassetiera 7 cassetti, comprensivo di PC con monitor 43" motorizzato, mouse e tastiera medicali.

CODICE: OF1004.MX

€ 11.433,00
€ 8.170,00

MOBILE LAVABO STERILA

Mobile lavabo Inox 800x650x1020(h) mm con 2 ante + lampada germicida UV-C e elettrovalvola.

CODICE: WASHCH-380

€ 5.795,00
€ 3.950,00

CARRELLO SERVITORE

Carrello servitore Inox 3 ripiani 1000x500x935 mm. Quattro ruote piroettanti di cui due con freno.

CODICE: DE1005X

€ 385,00
€ 249,00

MOBILE PER ASPIROL

Mobile Inox 1500x650x1020(h) mm con 2 ante, comprensivo di modulo antenna con 2 ripiani interni in vetro.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: HSX03

€ 4.705,00
€ 3.250,00

€ 8.821,00
€ 6.100,00

POLTRONA MORPHEUS

Poltrona chirurgica Morpheus in acciaio inox. Sky disponibile in 30 colorazioni. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

CODICE: DE1000X

€ 5.741,00
€ 4.100,00

CARRELLO ASPIROL

Sistema integrato Aspirol per il risciacquo del paziente, con modulo di aspirazione. In acciaio inox. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

CODICE: DE1002X

LAMPADA SURGICAL multiLED

Lampada scialitica medica 160.000 lux testa singola. Diametro del riflettore: 700 mm. Per soffitto fino a 2,9 metri di altezza.

CODICE: DE6.160

€ 8.221,00
€ 5.880,00

APPROFONDISCI

CONFIGURA

PACCHETTO CENTRO STUDIO **HANDY SURGERY** *soft*

L'OFFERTA COMPRENDE:

- **POLTRONA MORPHEUS COD.DE1000X**
4 motori, funzioni trendelenburg, manuali
2 joystick movimenti poltrona
Pulsantiera 10 funzioni
Poggiatesta con doppia articolazione
Basamento con piedini fissi
Struttura bianca RAL9010
Imbottitura standard, colore tappezzeria a scelta
- **CARRELLO PROPHY 900 COD.DE900E**
Siringa Luzzani acciaio Minimate
Micromotore ad induzione LED
Cordone per turbina 4 vie, safety handpiece
Strumenti con regolazione spray indipendenti
2 tray portastrumenti 28,4 x 18,3 cm
Dispositivo antireflusso
Bottiglia spray strumenti 1 litro
Pedale progressivo Feed Fec
Ripiano porta pedale
Centralina alimentazione 24/230 VAC
- **CARRELLO ASPIRAZIONE ASPISERVE COD.DE1002BSO**
Tavoletta su braccio con 2 supporti cannule
Cannula aspirasaliva e imbuto aspiratore chirurgico
Servomobile con ruote con 1 cassetto + 1 anta
Tray in alluminio 18 x 10 cm
- **SEGGIOLINO BEAUTY + SEGGIOLINO ROUND IN OMAGGIO**

€ 18.225,00
€ 11.630,00

€ 1.030,20



LA TESTIMONIANZA DI CHI HA SCELTO **TECNOMED ITALIA**



“ La linea Handy Surgery ci ha permesso abbinare con successo nei medesimi spazi trattamenti di odontoiatria tradizionale e trattamenti di chirurgia semplici e complessi. Ciò che ci ha colpito maggiormente è stata l'ergonomia spaziale di questa linea che permette con pochi movimenti di passare da uno studio odontoiatrico di ultima generazione ad una vera e propria sala chirurgica. In particolare, con la versatilità della poltrona chirurgica Morpheus, che con semplici movimenti garantisce posizioni inerenti alle diverse esigenze, abbiamo riscontrato un vantaggio significativo rispetto all'utilizzo di un riunito dentale tradizionale. ”

DR. DAVIDE BERARDI
SPECIALISTA IN CHIRURGIA ODONTOSTOMATOLOGICA

HANDY SURGERY *Soft Line* Orgoglio italiano

Il design delle linea Handy Surgery Soft Line è unico al mondo; ogni elemento è stato disegnato e progettato da Tecnomed Italia, in collaborazione con i migliori chirurghi maxillofacciali.

Soft Line è una linea versatile ed ergonomica, progettata tutta su ruote: tutti gli elementi, compresi i servomobili, possono essere spostati all'interno dello studio a seconda delle proprie necessità. Con questa nuova concezione, realizzare lo studio perfetto, che si adatti a tutte le tipologie di spazi ed esigenze, diventa più facile grazie alla modularità dei componenti.

Soft Line assicura una predisposizione dell'ambiente funzionale e accogliente per i propri pazienti, e un impatto visivo che contribuisce a rendere migliore la qualità dell'esperienza odontoiatrica. I materiali di ottima qualità, l'aspetto lineare ed elegante di tutti gli elementi contribuiscono a creare un ambiente professionale e curato nei dettagli.

Le proposte Tecnomed sono completamente configurabili e customizzabili per ogni esigenza del Professionista, dalle dimensioni dello studio alle performance ricercate, con grande attenzione al budget a disposizione.

ASPISERVE

SOLUZIONE CHIRURGIA HANDY SURGERY classic

CONFIGURA

SCOPRI LE INFINITE VARIANTI SU:
WWW.TECNOMEDITALIA.COM

CARRELLO PROPHY 900

Carrello chirurgico Prophy900. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

CODICE: DE900E

€ 5.023,00
€ **3.310,00**

POLTRONA STING

Poltrona Sting. Sky disponibile in 30 colorazioni. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

CODICE: DE3.00TM

€ 7.417,00
€ **4.590,00**

LAMPADA ESALIGHT2 A SOFFITTO

Lampada Esalight 2 installata a soffitto con braccio pantografo. Versione applicazione a soffitto per altezza da 3,3 a 3,5 metri.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: HSB01

€ 2.469,00
€ **1.540,00**

PROTEZIONE DA AEROSOL SKUDO

Dispositivo brevettato finalizzato alla protezione dagli aerosol in odontoiatria.

CODICE: DP2003S

€ 749,00
€ **399,00**

MODULO LAVABO + TOP

Mobile con lavabo in ceramica 500x480x900h mm + top 1500 mm con alzatina.

CODICE: WASHT1550

€ 2.179,00
€ **1.440,00**

SERVOMOBILE

Servomobile con 4 cassetti. 500x475x810h mm.

CODICE: DE9.31.450

€ 1.138,00
€ **749,00**

LAMPADA ESACAM SU STATIVO

Lampada EsaCam con videocamera 30X e autofocus, braccio pantografo su stativo mobile.

CODICE: DE6.3022RST

€ 7.793,00
€ **4.990,00**

PC ALL IN ONE + BRACCIO

PC All-In-One touchscreen completo di alimentatore medicale e braccio.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: HSB02

€ 2.894,00
€ **1.850,00**

ASPIRATORE CHIRURGICO ASPISERVE

Aspiratore chirurgico Aspisperve su ruote. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

CODICE: DE1002BSO

€ 3.270,00
€ **2.210,00**

CERCHI UNA SOLUZIONE CUSTOM? INVIACI LA TUA RICHIESTA!
WWW.TECNOMEDITALIA.COM/COMMERCIALE

INFINITE SOLUZIONI...

ESALINE COMPLETA

Soluzione completa illuminazione: EsaCam con videocamera 30X e autofocus + lampada Esalight 2 + applicazione a soffitto per altezza da 2,7 a 3,2 metri.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: HSB03

€ 8.595,00
€ **5.540,00**

SURGICAL multiLED SU STATIVO

Lampada SURGICAL multiLED su stativo. 140.000 Lux. Diametro del riflettore: 500 mm.

CODICE: DE6.1215

€ 6.571,00
€ **4.280,00**

POLTRONA MORPHEUS

Poltrona chirurgica Morpheus versione bianca. Sky disponibile in 30 colorazioni. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

CODICE: DE1000X

€ 8.021,00
€ **6.100,00**

CARRELLO ASIPIROL

Sistema integrato Aspirol per il risciacquo del paziente, con modulo di aspirazione. Versione bianca. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

CODICE: DE1002X

€ 5.741,00
€ **4.100,00**

APPROFONDISCI

CONFIGURA



PROMO RIUNITO OVER



OVER

Orgoglio italiano

Il riunito odontoiatrico Tecnomed Italia top di gamma; disegnato, progettato e realizzato totalmente in Italia. Il team di ricerca Tecnomed Italia con Over ha voluto puntare ai massimi livelli di tecnologia e materiali, tanto che questo riunito si allinea al top di gamma per tutta una serie di devices altamente professionali. Over possiede caratteristiche uniche rispetto a tutti gli altri riuniti presenti attualmente sul mercato.



BRACCETTI SERVOASSISTITI SPRIDO
Azionando lo strumento la frusta avanza automaticamente, eliminando la forza di tensione del cordone. Brevettato.



CORDONI SAFETY HANDPIECE
Una luce sulla ghiera del cordone si accende quando il manipolo ha bisogno di essere lubrificato. Brevettato.



FARETRA ASSISTENTE SNODATA
Un ampio raggio di movimento permette di utilizzare la faretra assistente anche dalla posizione a ore 10.



PANELLO COMANDI AGGIUNTIVO
Il pannello di controllo riconosce automaticamente lo strumento selezionato e permette di impostarne i valori.

L'OFFERTA COMPRENDE:

- **TAVOLETTA MEDICO**
 - Braccetti con sistema Servo System S.P.R.I.D.O.
 - 3 Strumenti: siringa Luzzani Minilight, micromotore brushless LED Safety Handpiece, cordone turbina fibrato Safety Handpiece
 - Doppio pannello di comando 14 funzioni
- **POLTRONA**
 - Tre posizioni in memoria: Trendelenburg, posizione zero, last position
 - Poggiatesta con doppia articolazione
 - Sei sensori di sicurezza antischiacciamento
 - Piastra di stabilità
- **TAVOLETTA ASSISTENTE**
 - Tavolettina a triplo snodo
 - Cannula aspirasaliva
 - Cannula aspiratore chirurgico
 - Pulsantiera 14 funzioni
- **GRUPPO IDRICO**
 - Bacinella in ceramica rotabile e estraibile
 - Predisposizione aspirazione anello liquido/umido
 - Bottiglia spray strumenti
 - Apertura gruppo idrico a compasso
- **LAMPADA SCIALITICA LED ESALIGHT 2**
 - Due assi di rotazione
 - Intensità luminosa variabile fino a 60.000 Lux

€ 19.516,00
€ 11.950,00

SCOPRI LE INFINITE VARIANTI SU:
WWW.TECNOMEDITALIA.COM

SOLUZIONE STUDIO RIUNITO OVER *new*

MOBILE LAVABO STERILA

Mobile lavabo Sterila versione bianca, 800x650x1020(h) mm con 2 ante + lampada germicida UV-C e elettrovalvola.

CODICE: WASHCH-380

€ 5.795,54

€ 3.950,00

ESALINE COMPLETA

Soluzione completa illuminazione: EsaCam con videocamera 30X e autofocus + lampada Esalight 2 + applicazione a soffitto per altezza da 2,7 a 3,2 metri).

COMPOSIZIONE ESEMPIO: HSB03

€ 8.595,00

€ 5.540,00

CARRELLO EASY TRAY + PC 21.5"

Carrello porta apparecchiature Easy Tray, in acciaio versione bianco, elettrificato, con 5 tray e asta porta flebo. PC All-in-one 21.5" Intel Core I3 8GB Windows 10 Pro incluso.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: OV04

€ 3.880,00

€ 2.590,00

SEGGIOLINO STING ST

Seggiolino STING ST. Regolazione alzata e schienale. Sky disponibile in 30 colorazioni.

CODICE: DE8.05TX

€ 923,66

€ 636,00

APPROFONDISCI

RIUNITO OVER

Riunito dentale Over senza lampada integrata. Sky disponibile in 30 colorazioni. Configurazione base (vedi configuratore on-line).

CODICE: DEV0.01E

€ 18.551,48

€ 11.290,00

CONFIGURA

SCOPRI LE INFINITE VARIANTI SU:
WWW.TECNOMEDITALIA.COM

INFINITE SOLUZIONI...




LAMPADA ESACAM A PARETE

Lampada EsaCam, versione applicazione a parete, composta da: videocamera 30X, autofocus, braccio pantografo.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: OV01

€ 7.485,00

€ 4.740,00

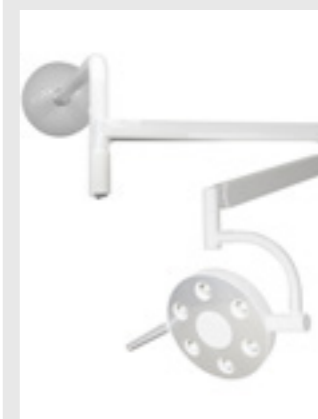

LAMPADA ESALIGHT2 A PARETE

Lampada EsaLight2, versione applicazione a parete, con braccio pantografo.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: OV02

€ 2.673,00

€ 1.650,00



LAMPADA ESACAM A PAVIMENTO

Lampada EsaCam, versione applicazione a pavimento, composta da: videocamera 30X, autofocus, braccio pantografo.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: OV03

€ 7.293,00

€ 4.630,00



MOBILE SIMPLE LINE

Mobile 2080x500x900mm completo di: lavello a sinistra + servomobile 4 scomparti + cassetteria 4 scomparti + mobile antina + elettrovalvola.

CODICE: DE9.24SX

€ 3.160,00

€ 2.090,00

CERCHI UNA SOLUZIONE CUSTOM? INVIACI LA TUA RICHIESTA!
WWW.TECNOMEDITALIA.COM/COMMERCIALE

APPROFONDISCI



STERINOX

Orgoglio italiano

La linea sterilizzazione Sterinox di Tecnomed Italia è unica al mondo; ogni elemento è stato disegnato e progettato da Tecnomed Italia per garantire il massimo della professionalità e dell'igiene.

La serie di mobili in acciaio Inox, sinonimo di pulizia, linearità e robustezza, è studiata per riunire tutte le apparecchiature e gli strumenti necessari per svolgere il processo di sterilizzazione senza intralci.

Si posiziona come prodotto top di gamma ed è adatta principalmente a cliniche orientate alla chirurgia odontoiatrica, ma anche a studi standard che richiedono la massima sicurezza in ambito di sterilizzazione.

Come gli arredi della sala chirurgica, anche gli elementi della sala di sterilizzazione Sterinox rappresentano una soluzione completamente modulare, grazie alle innumerevoli varianti e funzionalità a disposizione.

Le proposte Tecnomed sono completamente configurabili e customizzabili per ogni esigenza del Professionista, dalle dimensioni dello studio alle performance ricercate, con grande attenzione al budget a disposizione.

PACCHETTO STERINOX

L'OFFERTA COMPRENDE:

- **2 MODULI CON 6 CASSETTI IN ACCIAIO INOX COD.DE9.36X**
Dimensioni: 500x480x900(h) mm.
Guide scorrevoli con ammortizzatore integrato.
Cassetti estraibili.
- **1 MODULO CON ANTA IN ACCIAIO INOX COD.DE9.37X**
Dimensioni: 500x480x900(h) mm.
Due ripiani in vetro temperato, regolabili ed estraibili.
- **1 MODULO CON LAVELLO IN ACCIAIO INOX COD.WASHCH-ST**
Dimensioni: 500x480x900(h) mm.
Con elettrovalvola e interruttore a pedale.
Vasca a filo piano saldata.
- **TOP IN ACCIAIO INOX COD.DE9.38.65X**
Dimensioni: 1500x650x30(h) mm.
- **2 VETRINE PENSILI IN ACCIAIO INOX COD.DE0097X**
Dimensioni: 1000x380x480(p) mm.
Vetri scorrevoli.
- **LICENZA SGT + TABLET CONFIGURATO IN OMAGGIO**

€ 17.522,00

€ 10.933,78

€1.343,16



LICENZA SGT + TABLET CONFIGURATO



CONFIGURA

CERCHI UNA SOLUZIONE CUSTOM? INVIACI LA TUA RICHIESTA!
WWW.TECNOMEDITALIA.COM/COMMERCIALE



LA TESTIMONIANZA DI CHI HA SCELTO TECNOMED ITALIA



“Quando, dopo 25 anni di esperienza, abbiamo sentito l'esigenza di investire in una nuova sede, abbiamo deciso di rivolgerci innanzitutto a fornitori di eccellenza e, laddove fosse stato possibile, del territorio pesarese o marchigiano. Con questi principi, attraverso analisi approfondite e referenze, per la sala sterilizzazione della nostra sala chirurgica, abbiamo contattato Tecnomed Italia. Un'azienda e uno staff con cui ci siamo subito trovati a nostro agio, acquisendo ciò che cercavamo: qualità del prodotto, professionalità, disponibilità e flessibilità. La sala sterilizzazione Tecnomed Italia e relativi accessori, per merito, possono essere considerati un fiore all'occhiello del nostro centro.”

DR. MAURIZIO RADI

Fisioterapista - Osteopata - Massaggiatore sportivo - Chiropratico
FISIORADI MEDICAL CENTER

PROMO SISTEMA GESTIONE TRACCIAMENTO SGT

Che cos'è SGT?

SGT (Sistema di Gestione del Tracciamento) è il sistema certificato e brevettato da Tecnomed Service (dipartimento di sviluppo di Tecnomed Italia) per la registrazione forzata e l'archiviazione automatica di tutti gli step del processo di sterilizzazione, comprendente anche gli esiti delle apparecchiature sensibili e quelli dei test chimici di sterilizzazione.

Grazie al sistema SGT non occorre più avere un registro cartaceo, che deve essere aggiornato manualmente: il processo viene registrato in maniera digitale, facendo risparmiare tempo all'operatore e denaro allo studio. Inoltre viene garantito che l'operatore esegua correttamente tutti gli step del processo di sterilizzazione, grazie alla compilazione guidata.

Il sistema SGT registra e archivia:

- L'avenuta sequenza degli step del processo di sterilizzazione: nessun margine di errore
- Data e ora di inizio e fine processo: controllo dei tempi impiegati.
- Report di autoclavi, termodisinfettori dei test chimici e fisici, sia in formato fotografico che in formato digitale: corretta archiviazione dei dati sotto l'aspetto giuridico.



ISO/TS 17665-2:2009
UNI/TR 11408:2011
UNI/EN 556
D.lgs 81/2008

Compatibile con   

L'OFFERTA COMPRENDE:

- Licenza sistema SGT con accesso singolo con account alla piattaforma. Spazio di archiviazione 15.000 record

~~€ 845,00~~
€ 665,00

CODICE: DEA4.00SGT



LA TESTIMONIANZA DI CHI HA SCELTO
TECNOMED ITALIA



“La sterilizzazione dei dispositivi medici è un processo fondamentale in uno studio odontoiatrico e costituisce un indicatore di sicurezza e qualità tra i più importanti, sia per i pazienti che per l'intero staff. Un processo che necessariamente deve essere “tracciato” e “rintracciabile”, al fine di ottenere un'eccellenza in fatto di standard, ma anche una copertura in termini di tutele legali. Da tempo eravamo alla ricerca di un sistema che ci consentisse di rispettare tali principi e ora, grazie a SGT, ci siamo riusciti. SGT è un sistema - semplice e sicuro - di tracciabilità e rintracciabilità dell'intero percorso di sterilizzazione, che ci permette di conoscere e controllare tutti i passaggi e lo stato di fatto di ogni dispositivo.”

DOTT.SSA FABIA PROFILI
IGIENISTA DENTALE

ETICHETTATRICE AUTOMATICA UNIVERSALE

SGT-Print

Che cos'è SGT-Print?

SGT-Print è la prima etichettatrice autonoma digitale con rilevatore di viraggio in classe 1 conforme alla ISO 11140-1. Grazie alla memoria intelligente permette di stampare con un solo comando il numero di etichette desiderate riportando automaticamente:

- Numero di lotto
- Data
- Data scadenza
- Numero progressivo confezioni
- Codice operatore

Le etichette, a doppio adesivo con barra migrante, possono essere applicate sulle confezioni degli strumenti prima del ciclo di sterilizzazione e successivamente sulla cartella del paziente.

L'OFFERTA COMPRENDE:

- Etichettatrice SGT-PRINT universale.
- Rotolo 800 etichette doppio adesivo 62x29 mm
- Classe 1 - EN ISO 11140-1
- Alimentazione 230/24 vac

~~€ 1.115,00~~
€ 590,00

APPROFONDISCI

CODICE: DEA4.13SGTA



TERMOSIGILLATRICE

Termoseal 300



- Compatta ed affidabile.
- Riscaldamento a ciclo continuo, zero tempi di attesa
- Barra di alluminio a vista indistruttibile.
- Possibilità di regolazione della temperatura.
- Larghezza saldatura: 15 mm.
- Lunghezza saldatura: 360 mm.
- Lunghezza asta porta rotoli: 375 mm.

~~€ 543,00~~
€ 299,00

CODICE: SEA300

KIT CONVENIENZA ULTRASUONI

Vasca ultrasuoni Digiclean 5 litri + accessori



L'OFFERTA COMPRENDE:

- Vasca ultrasuoni con coperchio e rubinetto di scarico. Pannello LCD semplice e intuitivo con count down visivo del ciclo. Riscaldamento costante regolabile fino a 80°C. Capacità nominale: 5,04 litri (240x150x140) mm. Capacità reale: 4,350 litri
- Cestello grande e piccolo in acciaio inox a maglie piccole.
- Due bicchieri in vetro Pyrex da 600ml.
- Supporto per due bicchieri.

~~€ 768,00~~
€ 390,00

CODICE: OFCLEA5L

PROMO AUTOCLAVE CLASSE B

Autoclave Ecate con distillatore Tecnostil in omaggio



L'OFFERTA COMPRENDE:

• **Autoclave Ecate**

Camera in acciaio Inox 304 realizzata in un'unica fusione, con porta tray a 3 ripiani, utilizzabile anche per tray chirurgici.

Basso consumo energetico per un risparmio sia in termini economici che per l'ambiente.

Pannello comandi user friendly, con display LCD che visualizza i principali parametri di funzionamento e permette di controllare in diretta le fasi del ciclo, segnalando eventuali errori.

Capacità 18 litri, 6+2 programmi (con ciclo rapido), 460x455x580 mm (misure esterne lhxpx), salvataggio dei dati attraverso USB.

Assistenza tecnica garantita in tutta Italia.

• **Distillatore Tecnostil in omaggio**

Caldaia e condensatore in acciaio, indistruttibili!

Distilla 1,5 litri di acqua in 1 ora.

Spegnimento automatico a fine ciclo.

Dimensioni (con serbatoio) 375 x 385 mm.

€ 3.971,00

€ **2.370,00**

CODICE: OF551

APPROFONDISCI

PROMO SKUDO

Principali vantaggi

- SKUDO è una soluzione pratica, unica, ergonomica ed efficace per raggiungere la massima protezione dagli aerosol.
- Sicurezza del made in Italy; SKUDO è un sistema certificato e brevettato.
- Braccio flessibile; nessuna limitazione di posizionamento.
- Universale: si applica facilmente su ogni riunito.
- Silenzioso, solo 12 db.
- Consumo d'aria irrisorio, solo 16 ml/min.
- Dispositivo medico registrato.

L'OFFERTA COMPRENDE:

- Apparecchiatura SKUDO.
- Ganascia standard

€ 749,00

€ **399,00**

CODICE: DP2003S

APPROFONDISCI



Kit adattatore ganascia
Per riunito Vitali®

€ 47,00

€ **27,00**

CODICE: DP2003.6VT



Kit adattatore ganascia
Per riunito Sirona® serie C

€ 48,00

€ **27,00**

DP2003.6SC.4



Kit adattatore ganascia
Per riunito KaVo® E70-E80

€ 47,00

€ **27,00**

CODICE: DP2003.5.3K



LA TESTIMONIANZA DI CHI HA SCELTO

TECNOMED ITALIA



“Quando mi hanno portato SKUDO da provare ero abbastanza scettico dal momento che ormai avevo provato molti sistemi per ridurre la contaminazione da aerosol.

Sono ormai due mesi che lo utilizzo e devo dire che è davvero incredibile, neanche una gocciolina arriva a me.

SKUDO si è dimostrato clinicamente molto utile pertanto, mi sento di suggerirlo ai miei colleghi. Nella sua semplicità, trova a mio avviso una grande efficacia.”

PROF. ANGELO PUTIGNANO

Professore di Odontoiatria Restaurativa Università Politecnica delle Marche.
Studio odontoiatrico Luciani Putignano



CANALE DEDICATO!

Guarda le video opinioni
dei tuoi colleghi!

PROMO LAMPADRE SURGICAL multiLED

Caratteristiche comuni lampade SURGICAL multiLED

- Temperatura del colore: regolabile da 3300 a 5000 K°
- Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Profondità di illuminamento: ≥1300mm
- Irradianza totale: 426 W / m²
- Dimensione del campo chiaro: 160 ~ 280mm
- Durata della lampadina led : 50,000h
- Tensione di alimentazione: AC110-240v, 50 / 60Hz
- Consumo energetico totale: 200 W
- Altezza massima di installazione: 2,9 metri
- Certificazione: 93/42/EEC - 2007/47/CE - IEC62321
- Fabbricazione rispetto le norme EN ISO 13485:2016

TESTA DOPPIA

Illuminamento: 300.000 lux (140000 + 160.000)
Diametro dei riflettori: 500 mm + 700 mm

~~€ 13.745,00~~
€ 8.954,00

CODICE: DE6.162

TESTA SINGOLA

Illuminamento: 160.000 lux
Diametro del riflettore: 700 mm

~~€ 8.221,00~~
€ 5.880,00

CODICE: DE6.160



TESTA DOPPIA

TESTA SINGOLA



APPROFONDISCI



PROMO LAMPADA SURGICAL multiLED SU STATIVO



- Illuminamento: 140.000 Lux
- Diametro del riflettore: 500 mm
- Temperatura del colore: regolabile da 3300 a 5000 K°
- Indice di riduzione del colore (Ra): >95
- Profondità di illuminamento: ≥1300mm
- Irradianza totale: 426 W / m²
- Dimensione del campo chiaro: 160 ~ 280mm
- Durata della lampadina led: 50,000h
- Tensione di alimentazione: AC110-240v, 50 / 60Hz
- Consumo energetico totale: 60 W
- Certificazione: 93/42/EEC - 2007/47/CE - IEC62321
- Fabbricazione rispetto le norme EN ISO 13485:2016

SU STATIVO TESTA SINGOLA

~~€ 6.571,00~~
€ 4.280,00

CODICE: DE6.1215

PROMO LAMPADRE ESA LINE

ESALIGHT 2



- 60.000 Lux
- Sensore per le regolazioni
- Completa di braccio pantografato
- Alimentazione 24 Vac
- Certificazione: 93/42/EEC

~~€ 966,00~~
€ 690,00

CODICE: DE6.3023

ESACAM



- 60.000 Lux
- Sensore per le regolazioni
- Videocamera Full Hd con Zoom 30 X e autofocus
- Completa di braccio pantografato
- Alimentazione 24 Vac
- Certificazione: 93/42/EEC

~~€ 5.779,00~~
€ 3.780,00

CODICE: DE6.3022R

APPROFONDISCI



SCOPRI TUTTE LE VARIANTI DISPONIBILI SU:
WWW.TECNOMEDITALIA.COM

INFINITE SOLUZIONI...




LAMPADA ESACAM A PARETE

Lampada EsaCam, versione applicazione a parete, composta da: videocamera 30X, autofocus, braccio pantografo.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: OV01

~~€ 7.485,00~~
€ 4.740,00

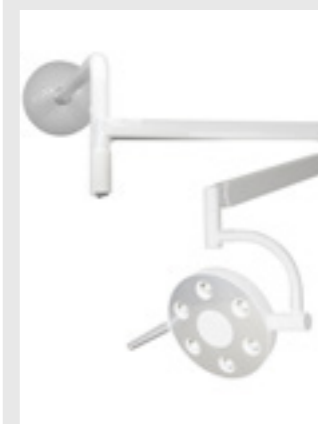

LAMPADA ESALIGHT2 A PARETE

Lampada EsaLight2, versione applicazione a parete, con braccio pantografo.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: OV02

~~€ 2.673,00~~
€ 1.650,00



LAMPADA ESACAM SU STATIVO

Lampada EsaCam con videocamera 30X e autofocus, braccio pantografo su stativo mobile.

CODICE: DE6.3022RST

~~€ 7.793,00~~
€ 4.990,00

PC ALL IN ONE + BRACCIO

PC All-In-One touchscreen completo di alimentatore medicale e braccio.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: HSB02

~~€ 2.894,00~~
€ 1.850,00



ESALINE COMPLETA

Soluzione completa illuminazione: EsaCam con videocamera 30X e autofocus + lampada EsaLight 2 + applicazione a soffitto per altezza da 2,7 a 3,2 metri.

COMPOSIZIONE ESEMPIO: HSB03

~~€ 8.595,00~~
€ 5.540,00

i DIGISMILE: SCANNER INTRAORALE 3D

DIGISMILE è un dispositivo 2 in 1: oltre alla funzione di scanner 3D, può essere utilizzato anche come fotocamera intraorale per scattare foto HD. È possibile condividere le immagini con un laboratorio e utilizzarle durante la consultazione dei pazienti anche su un dispositivo mobile.

Grazie al programma ArchiMED Suite 4 incluso è possibile acquisire le immagini comodamente da mobile con un semplice "clic" e mostrarle in real time al paziente, fornendo un'esperienza utente fluida sia per l'odontoiatra che nel rapporto dentista-laboratorio.

Un percorso di apprendimento iniziale con una formazione tecnica e clinica affiancherà il Professionista, rendendo l'utilizzo di DIGISMILE semplice e snello fin dal primo giorno di utilizzo. Inoltre i video tutorial e le procedure guidate, supporteranno l'operatore nell'uso del prodotto, oltre alla garanzia di un partner commerciale sempre presente nel tempo.

La gamma di applicazioni includono restauro dentale, ortodonzia, implantologia ricostruttiva ossea.

Principali vantaggi:

- 2-in-1: scanner intraorale 3D + camera intraorale HD con un unico dispositivo
- Rintracciamento automatico della scansione
- Scansione rapida in tempo reale
- Connettività plug-and-play USB 3.0
- Tutte le funzioni in un unico tasto
- La precisione e la calibrazione del colore automatica azzerano gli errori dell'operatore, ottimizza il tempo di lavoro e promuove il controllo delle infezioni nel contesto clinico.
- Funzione anti appannamento
- Punta rimovibile e autoclavabile
- Esportazioni aperte: supporta i file STL, PLY, OBJ
- Sistema completamente aperto "STL FREE" COMPATIBILE con EXOCAD
- Tempi di utilizzo ottimizzati; sistema completamente aperto "STL FREE" compatibile con EXOCAD per la comunicazione con i laboratori
- ArchiMED Suite 4 incluso (approfondimento a pagina 7)



PREZZO SU RICHIESTA
CODICE: SCD30N



i ArchiMED Suite 4: IL SISTEMA DI COMUNICAZIONE INTELLIGENTE


Il nostro impegno quotidiano è spinto dall'ambizione costante di generare valore per il Professionista, con la garanzia del Made in Italy. In quest'ottica siamo orgogliosi di ampliare il nostro Catalogo con DIGISMILE; lo scanner intraorale 3D di ultima generazione.

Ma la novità e l'innovazione non risiede solo nel prodotto, ma anche nel plus che lo differenzia.

Con DIGISMILE è inclusa ArchiMED Suite 4, una soluzione gratuita, tecnologicamente intelligente (quindi semplice nell'utilizzo) e unica nell'ambito della software imaging e cartella paziente.

ArchiMED Suite 4, non è "solo un Software", ma un valore aggiunto per il Professionista e il suo Team; consente una semplice gestione delle immagini e un'ampia gamma di funzioni "intelligenti" integrate, utili per migliorare le capacità diagnostiche, e rendere facile e smart il flusso di lavoro e della comunicazione. I video tutorial e le procedure guidate e seguiranno l'operatore passo dopo passo rendendo l'utilizzo del software semplice e snello fin dal primo giorno di utilizzo.

ArchiMED Suite 4, è progettato per lavorare in modalità Terminal Server. Questa tecnologia consente di accedere al programma dovunque voi vi troviate, ma sempre in totale sicurezza.

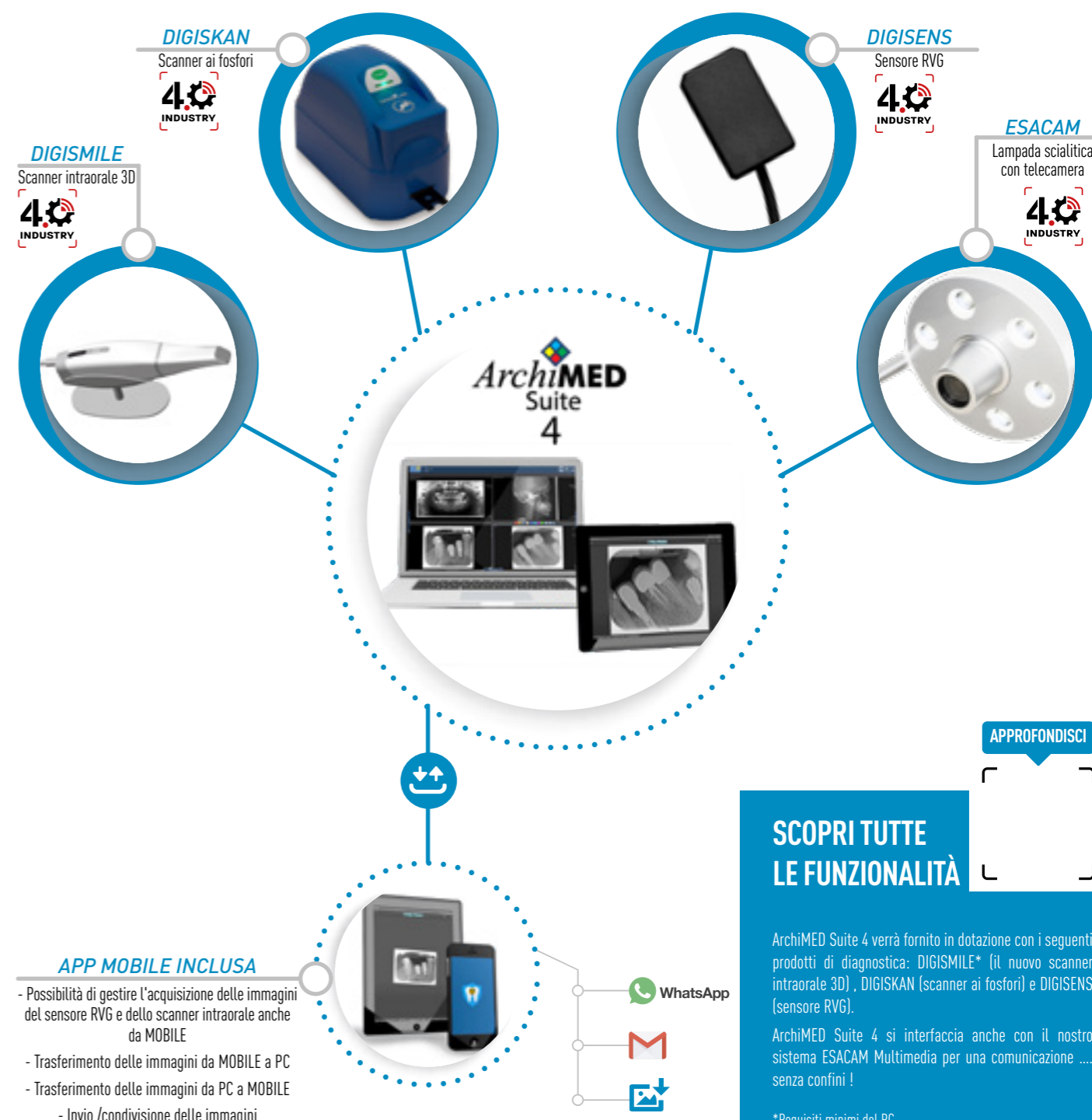

APPROFONDISCI

SCOPRI TUTTE LE FUNZIONALITÀ

ArchiMED Suite 4 verrà fornito in dotazione con i seguenti prodotti di diagnostica: DIGISMILE* (il nuovo scanner intraorale 3D), DIGISKAN (scanner ai fosfori) e DIGISENS (sensore RVG).

ArchiMED Suite 4 si interfaccia anche con il nostro sistema ESACAM Multimedia per una comunicazione ... senza confini!

- *Requisiti minimi del PC
- Microprocessore i7
 - Ram minima 16 GB
 - Scheda video NVIDIA pari o superiore GTX1050
 - Per sistema operativo Windows 10, 64 bit

SENSORE RVG

DIGISENS: acquisizione Smart dell'imaging radiografico



DIGISENS è un sensore innovativo di ultima generazione, flessibile e molto resistente per la realizzazione di immagini di alta qualità in tempo reale. Grazie al programma ArchiMED Suite 4 incluso è possibile **acquisire le immagini comodamente da mobile** con un semplice "clic" e mostrarle in real time al paziente.

Principali caratteristiche

- Tecnologia CMOS, risoluzione teorica HD con 28 lp/mm.
- Design ergonomico, massimo il comfort del paziente.
- Facile da installare, maneggiare e trasportare.
- ArchiMED Suite 4 incluso (approfondimento a pagina 7).
- Area sensibile (attiva) 30x20 mm, cavo 2 metri USB 2.0.
- Per sistemi operativi Windows XP / 7 / 8 / 10.



€ 3.442,50
€ 2.256,00

CODICE: RVG08T



APPROFONDISCI

SCANNER AI FOSFORI

DIGISKAN: il dispositivo più compatto presente sul mercato!



DIGISKAN è il nuovo scanner per lastre ai fosfori che permette un processo di imaging rapido, semplice, sicuro ed efficiente.

Principali caratteristiche

- Identificazione automatica lastrina e lettura in tempi rapidissimi.
- Funziona perfettamente con tutti i tradizionali radiografici.
- Fino a 2000 scansioni per ogni lastrina.
- Qualità d'immagine altamente dettagliata; risoluzione 20 lp/mm.
- Connessioni illimitate per uso multi-utente e multi-paziente: più utenti possono impiegare il sistema contemporaneamente.
- ArchiMED Suite 4 incluso (approfondimento a pagina 7).
- Per sistemi operativi Windows XP / 7 / 8 / 10.



€ 5.233,00
€ 3.464,00

CODICE: SCF18N



INCLUSO
ArchiMED
Suite
4

RADIOGRAFICO CON PALMARE

TECNOXRAY con palmare TIM-X e valore DAP in tempo reale

Nel nuovo radiografico TECNOXRAY (a corrente continua) il controllo dei parametri di esposizione vengono impostati, in massima sicurezza, tramite il palmare wireless TIM-X di ultima generazione.

Il micro fuoco da 0.3 mm permette di ottenere radiografie con maggiori dettagli con qualsiasi tipo di film, e di sensori, riducendo al minimo il tempo di esposizione / dose emessa.

La possibilità di gestire kilovolt [kV], milliampere [mA] e tempo di esposizione [ms] a distanza lo rendono unico nel suo genere.



Principali caratteristiche

- Valore del DAP in tempo reale.
- Tubo Toshiba D-045 OX/70-4 OX/70-3.
- Punto focale: 0,3 mm (IEC 336).
- Doppio braccio pantografato, leggero e autobilanciato.
- Funzione convenzionale e RVG.

CORRENTE CONTINUA con palmare

€ 3.635,00
€ 2.119,00

CODICE: DE73RX



APPROFONDISCI

PROMO RADIOGRAFICI ENDORALI STANDARD

TECNOXRAY con Comando Wireless

- Immediati e semplici da utilizzare: tutte le funzioni sono integrate nel monoblocco.
- Macchia focale precisa, eccelsa qualità d'immagine.
- Bassi tempi di esposizione e basse emissioni, particolarmente adatti alla radiologia digitale.
- Funzione convenzionale e RVG.
- Comando Wireless, certificato IMQ, incluso: per effettuare le radiografie dall'esterno della stanza in totale sicurezza!
- Maneggevoli: doppio braccio pantografato, leggero e autobilanciato.
- Facili da installare, non necessitano di un impianto.

CORRENTE CONTINUA


€ 3.090,00
€ 1.990,00

CODICE: DE71RX

CORRENTE ALTERNATA

€ 2.500,00
€ 1.690,00

CODICE: DE72RX

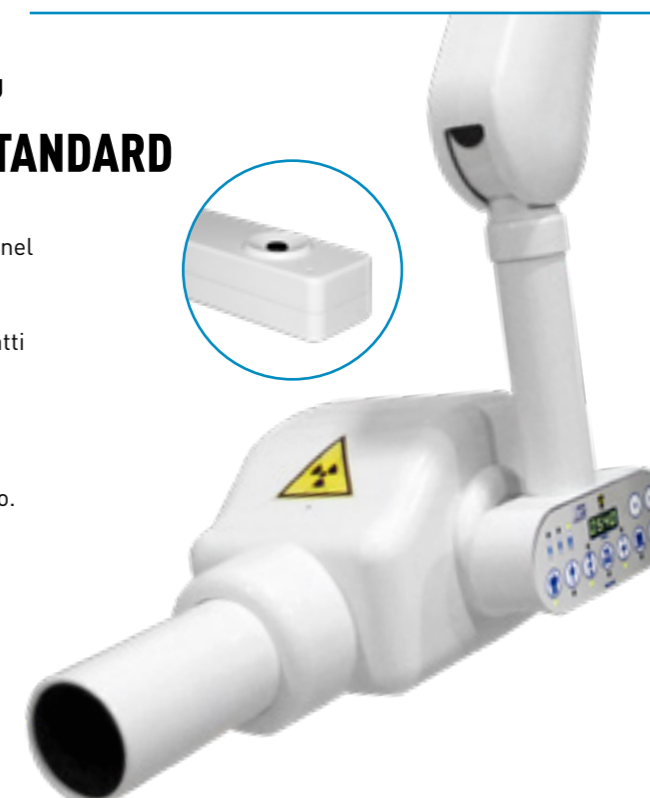

TELECAMERA INTRAORALE

Tecnocam



- Funziona anche senza computer.
- Output 1 - collegamento a monitor: VGA.
- Output 2 - collegamento a PC: WIFI.
- Sensore CCD 1/4" Sony alta sensibilità. Messa a fuoco automatica.
- Telecomando per controllo delle funzioni.
- Risoluzione 5.0 Mpixel.
- Manipolo leggerissimo, solo 40 gr.

€ 824,52
€ 339,00

CODICE: AP195

TELECAMERA INTRAORALE USB

Double Touch



- Collegamento diretto al computer tramite USB 2.0.
- Sensore CCD 1/4" Sony alta sensibilità.
- Funzione autofocus.
- Doppio pulsante di cattura immagine.
- Risoluzione 2.0 Mpixel.
- Ergonomica e leggera, il manipolo pesa solo 50 gr.

€ 941,67
€ 397,00

CODICE: AP193UT

APPROFONDISCI

PC TOUCHSCREEN

TECNOTOUCH con alimentatore medicale



- Pannello touch screen 21.5".
- Windows 10 Professional.
- Alimentatore medicale IEC 60601.

€ 2.463,20
€ 1.590,75

CODICE: MOT248PCT*



MONITOR sanificabili

VISIONMED con o senza alimentatore medicale



- Resistente ai graffi, all'acqua ed agli impatti grazie al vetro protettivo LCD.
- Schermo piatto 19" TFT LED formato 16:10.
- Risoluzione HD 1440 x 900. Input DVI, HDMI.
- Retroilluminazione LED. Attacco VESA 100.

CON ALIMENTATORE MEDICALE

€ 604,78
€ 432,42

CODICE: MOT19MEN

SENZA ALIMENTATORE MEDICALE

€ 432,24
€ 343,39

CODICE: MOT19SE

PROMO EASY TRAY NANO

Carrello porta apparecchiature

L'OFFERTA COMPRENDE:

- Struttura Easy Tray Nano su ruote. Altezza da terra: 875 mm
- 3 tray 465x315x20 mm in acciaio inox estraibili e sterilizzabili.
- Sistema di alimentazione centralizzato per attrezzature ospitate.



€ 772,51
€ 487,00

CODICE: OF1003BIN.01

PROMO EASY TRAY INOX

Carrello porta apparecchiature

L'OFFERTA COMPRENDE:

- Struttura Easy Tray Inox su ruote.
- 5 tray 465x315x20 mm in acciaio inox estraibili e sterilizzabili.
- Asta portaflebo.
- Sistema di alimentazione centralizzato per attrezzature ospitate.



€ 1.626,00
€ 1.025,00

CODICE: OF1003X.00

COMPONI IL BRACCIO FRONTALE PER EASY TRAY

Chiedi al tuo tecnico se sono adatti ai tuoi manipoli!

BRACCIO PORTA MANIPOLI




- Braccio frontale in Inox a doppio snodo
- Ospita fino a 3 supporti (esclusi)

€ 371,26
€ 229,00

CODICE: DE1003X.5M




SUPPORTO PER MANIPOLO DA IMPIANTI TIPO A

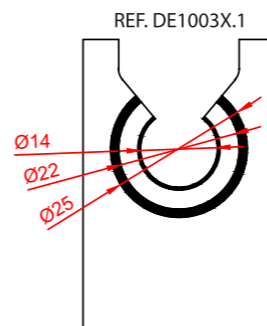

€ 106,57
€ 66,00

CODICE: DE1003X.1


SUPPORTO PER MANIPOLO DA IMPIANTI TIPO B

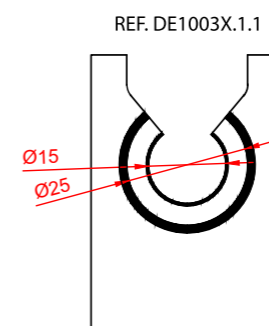

€ 106,57
€ 66,00

CODICE: DE1003X.1.1


SUPPORTO PER MANIPOLO PIEZOSURGERY

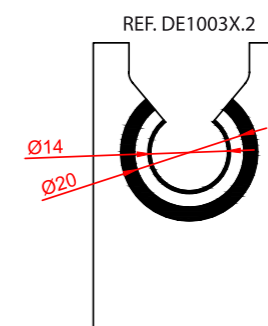

€ 106,57
€ 66,00

CODICE: DE1003X.2

SUPPORTO PER MANIPOLO ELETTROBISTURI

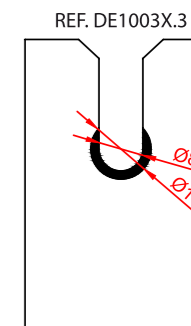

€ 106,57
€ 66,00

CODICE: DE1003X.3

*A seconda della disponibilità del produttore il modello potrà cambiare, sostituendolo con altro lotto di identica o superiore qualità. NON ADATTO PER SCANNER 3D DIGISILE

i MICROMOTORE ENDODONTICO

ENDO SMART PLUS con collegamento al rilevatore apicale

Endo Smart Plus è un motore endodontico senza fili ad alte prestazioni che può essere utilizzato con il rilevatore apicale Woodpex V.

Collegandolo al rilevatore apicale può essere monitorata la posizione della lima all'interno del canale, per una preparazione più efficiente e sicura. Inoltre è possibile attivare funzioni come l'Auto Apical Reverse, Apical Start e Stop, Apical Slow-down.

La testina miniaturizzata e orientabile a seconda della posizione della zona da trattare, consente di accedere anche alle aree normalmente di difficile accesso.

Il display OLED, di facile lettura, mostra informazioni rilevanti quali velocità, coppia e programma. Il display può essere anche invertito per i dentisti mancini.

Principali vantaggi

- Possibilità di collegamento con rilevatore apicale Woodpex V.
- Funzione auto-reverse con allarme che aiuta a prevenire le fratture delle lime.
- Funzione reciprocante.
- Facile da utilizzare, maneggevole e leggero, con testina miniaturizzata per un facile accesso.
- Testina orientabile 20° - 400°.
- Rotazione stabile anche durante i cambiamenti di carico del micromotore.
- Taratura automatica del torque.
- Torque: 0,4-5 Ncm.
- Velocità di rotazione: 100 - 1200 g/m (minima - massima).
- Rapporto testina in dotazione 6:1
- Programmi: 10 personalizzabili.
- Senza fibra ottica.
- Peso manipolo completo di contrangolo: 160 gr.

APPROFONDISCI



PROMO KIT ENDODONZIA

Micromotore endodontico Endo Smart Plus + Rilevatore apicale Woodpex V



L'OFFERTA COMPRENDE:

- Micromotore endodontico Endo Smart Plus.
- Rilevatore apicale Woodpex V.

€ 1.626,14
€ 599,00

CODICE: OF18EW

MICROMOTORI PER IMPLANTOLOGIA

IMPLANT-X led & IMPLANT-X cieco

- Display touchscreen a colori con guida a menu facilitata e vetro protettivo sanificabile.
- Vetro protettivo; semplice da pulire e disinfettare.
- La possibilità di utilizzare parametri preimpostati elimina ripetitivi processi di impostazione.
- Innovativo micromotore chirurgico; leggerissimo grazie alle sue dimensioni contenute, è in grado di calibrare automaticamente la forza del micromotore in base al tipo di contrangolo installato (contrangolo non incluso nella dotazione), mentre il torque di 6,2 Ncm ne garantisce uno uscita di 80 Ncm.
- Micromotore e cordone completamente autoclavabili.
- Totale controllo dell'unità centrale anche con la sola pedaliera multifunzione.
- Il contrangolo non è incluso nella dotazione.

IMPLANT-X led


€ 2.896,36
€ 1.499,00

CODICE: MM700L

IMPLANT-X cieco

€ 2.510,18
€ 1.390,00

CODICE: MM700N

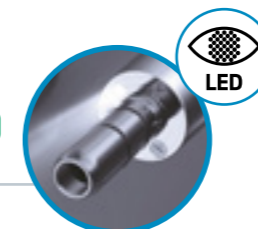

APPROFONDISCI

CONTRANGOLO NON INCLUSO NELLA DOTAZIONE

MICROMOTORE ENDODONTICO

Endo Smart



- Facile da utilizzare, maneggevole e leggero, con testina miniaturizzata per un facile accesso.
- Rotazione stabile anche durante i cambiamenti di carico del micromotore.
- Funzione di auto-reverse con allarme.
- Funzione reciprocante.
- Torque: 0,6-5.0 Ncm.
- Velocità di rotazione: 100-1000 g/m (minima - massima).
- Rapporto testina in dotazione 1:1
- Programmi: 9 personalizzabili.
- Senza fibra ottica.
- Peso manipolo completo di contrangolo: 137 gr.

€ 853,89
€ 408,00

CODICE: MM18EN

RILEVATORE APICALE

Woodpex V







€ 423,73
€ 185,00

CODICE: RV002WN

- Immagine della rilevazione apicale molto ingrandita, per una visione immediata e chiara nel display LCD a colori.
- Misurazione estremamente accurata grazie alla calibrazione automatica.
- Segnali acustici di avviso secondo la posizione della lima nel condotto radicolare.
- Misurazione sia in campo secco che umido.

TURBINE SilkLine

- Manutenzione semplice, sicura, economica e veloce: innovativo sistema di lubrificazione Fast-Oil.
- Dimensioni ridotte della testina per raggiungere le zone di difficile accesso.
- Compatibile con gli attacchi maggiormente utilizzati.
- Ricambistica a prezzi esigui.
- Fibra ottica in vetro, cuscinetti in ceramica, tre spray.

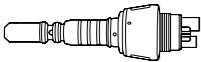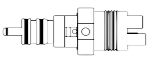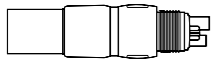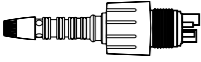TIPO DI CONNESSIONE	DESCRIZIONE TURBINA	CODICE	PREZZO
	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi KaVo®	T501LK	€ 594,07 € 369,00
	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi Bien-Air®	T501LB	€ 660,28 € 412,00
	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi NSK®	T501LN	€ 594,07 € 369,00
	Turbina fibra ottica IVORY, compatibile con attacchi Sirona®	T501LS	€ 594,07 € 369,00

APPROFONDISCI



TESTINE PER ANGOLO SilkLine

Serraggio rotostop

Le testine possono essere estratte e sostituite, su tutta la linea per profilassi, a seconda del rapporto di riduzione desiderato, in modo semplice e veloce.

Perfettamente compatibili

Le testine sono perfettamente compatibili con tutti i tipi di angoli Ivory, KaVo® e Mk-Dent®.

APPROFONDISCI



CONTRANGOLO SilkLine
MULTIPLICATORE ROSSO 1:5



- Moltiplicatore rosso 1:5, fibra ottica in vetro, velocità massima 200.000 rpm, quattro spray.

€ 858,84
€ 480,69

CODICE: SL415L

CONTRANGOLO Neo Line
BLU 1:1



- Manipolo contrangolo blu 1:1 cieco, velocità massima 40.000 rpm, spray interno.

€ 395,01
€ 249,00

CODICE: SL411E

DRITTO SilkLine
BLU 1:1



- Manipolo dritto blu 1:1 fibra ottica in vetro, velocità massima 40.000 rpm, spray interno.

€ 561,00
€ 339,00

CODICE: SL211L

	COMPATIBILITÀ	INDICAZIONI	VELOCITÀ MAX.	Ø FRESA	CODICE	PREZZO
	KaVo® 68LH/LDN	Standard, rapporto 1:1	40.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL611C	€ 213,47 € 129,00
	KaVo® 67LH	Standard, rapporto 2:1	20.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL621C	€ 213,47 € 129,00
	KaVo® 80LD-L80	Standard, rapporto 1:1	40.000 rpm	1,6 mm	SL680C	€ 255,24 € 149,00
	KaVo® CL3	Chirurgia, rapporto 3:1	10.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL631C	€ 255,24 € 164,00
	KaVo® 3LDSY-L3Y	Endodonzia, rapporto UD04	5.000 rpm	3,5/4 mm (ENDO)	SL633Y	€ 231,38 € 149,00
	KaVo® 31LR-L31	Profilassi, rapporto 1:1	3.000 rpm	SNAP-ON	SL621P	€ 219,39 € 129,00
	KaVo® 53LDN-L53	Profilassi, rapporto BF60	3.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL653C	€ 231,38 € 149,00
	KaVo® S201	Chirurgia, rapporto 3:1	10.000 rpm	2,334/2,350 mm	SL620X	€ 255,24 € 164,00

ATTACCHI PER TURBINE SilkLine

Perfettamente compatibili

Gli attacchi Ivory sono compatibili con la maggior parte delle turbine presenti nel mercato; sceglierlo uguale al modello già a disposizione permette la totale intercambiabilità degli strumenti ottimizzando i costi.



APPROFONDISCI



PER IVORY & KAVO®



€ 130,74
€ 79,90

CODICE: C31K



€ 196,92
€ 119,90

CODICE: C30LK



€ 213,47
€ 129,90

CODICE: C31LK

PER IVORY & SIRONA®



€ 180,36
€ 109,90

CODICE: C30LS



€ 123,92
€ 76,90

CODICE: C30S

PER W&H®



€ 180,36
€ 109,90

CODICE: C30LW

PER IVORY & NSK®



€ 180,36
€ 109,90

CODICE: C30LN

PER IVORY & BIENAIR®



€ 263,12
€ 159,90

CODICE: C30LB

KIT CONVENIENZA SilkLine



- 2 turbine fibra ottica Silk Line codice T501LK, compatibili con attacchi KaVo®

€ 1.188,00
€ 712,00

CODICE: OF501



- 2 contrangoli blu 1 : 1 fibra ottica, Silk Line codice SL411L

€ 1.221,24
€ 739,00

CODICE: OF411



- 2 contrangoli blu 1 : 1 ciechi, Neo Line codice SL411E

€ 790,01
€ 469,00

CODICE: OF421E



- 2 contrangoli moltiplicatore rosso 1:5 fibra ottica, Silk Line codice SL415L

€ 1.717,68
€ 849,00

CODICE: OF550



- 2 manipoli dritti blu 1:1 ciechi, Neo Line codice SL211E

€ 601,47
€ 429,00

CODICE: OF553E

i L'AZIENDA

Innovazione e qualità per ogni tua esigenza

Ivory Mechanikkonzept nasce nel 2015 da un gruppo di professionisti con più di 25 anni di esperienza nel settore dentale, affermandosi velocemente in più di 15 paesi al mondo come Smart Company, produttore di manipoleria dentale di alta qualità "Made in Europe".

I prodotti, anche compatibili con le più famose marche del mercato internazionale, seguono gli standard qualitativi della normativa europea CE 93/42 allegato V.

Con la mission "Rendere il lavoro del medico più semplice ed efficace", Ivory ha attivato progetti innovativi ed esclusivi quali la formazione e un sistema di gestione, entrambi completamente online, che garantiscono un servizio altamente automatizzato e tempi ridotti.



ABLATORE PARODONTALE PT-3

Touch screen, led, doppio collegamento

Principali vantaggi

- Movimento ellittico per un'efficace rimozione del tartaro e riducendo i tempi operativi.
- Vibrazioni minime, con un'ampiezza di solo 20-60 µm, per un trattamento indolore per il paziente.
- Controllo touch di precisione, resistente all'acqua.
- Dispenser con carico dall'alto.
- Manipolo LED autoclavabile.
- 5 inserti in dotazione realizzati in titanio.

Dotazione

- Unità principale.
- Manipolo led.
- 5 inserti realizzati in titanio (P50LT, P50RT, P52T, P56T, P59T)
- Steril box inox
- Chiave stringipunte

€ 2.430,00

€ 1.129,00



CODICE: SCR3000



APPROFONDISCI

i BENEFICI VISIBILI



PRIMA DEL TRATTAMENTO

DURANTE IL TRATTAMENTO

DOPO IL TRATTAMENTO

DOPO UN MESE DAL TRATTAMENTO

Evidente miglioramento delle condizioni parodontali del paziente nel tempo, oltre a preservare lo smalto dentale.

NOVITÀ: INSERTI PER ABLATORE PARODONTALE PT-3

Compatibili con i principali produttori di ablatori



APPROFONDISCI

OCCASIONE



Confezione 10 pezzi punte PEEK per PG04KCP

€ 123,27
€ 74,90

CODICE: PG10KCPE

	INDICAZIONI	COMPATIBILITÀ	CODICE	PREZZO
	PUNTA PERIO Rimozione del tartaro da spazi interdentali ristretti. Rimozione del biofilm sopragengivale e sottogengivale	P52 - PL3 - P20E COMPATIBILE WOODPECKER - EMS - NSK/E	PG052T	€ 61,64 € 36,70
	PUNTA PERIO Rimozione del tartaro da spazi interdentali ristretti. Rimozione del biofilm sopra gengivale tasche profonde	P53L - PL1 - P21LE COMPATIBILE WOODPECKER - EMS - NSK/E	PG053LT	€ 61,64 € 36,70
	PUNTA PERIO Rimozione del tartaro da spazi interdentali ristretti. Rimozione del biofilm sopra gengivale tasche profonde	P53R - PL2 - P21RE COMPATIBILE WOODPECKER - EMS - NSK/E	PG053RT	€ 61,64 € 36,70
	PUNTA PERIO Rimozione del biofilm sotto gengivale nelle tasche più profonde e nelle forcazioni. Trattamento degli spazi interdentali sopra e sottogengivali	P54L - PL4 - P25LE COMPATIBILE WOODPECKER - EMS - NSK/E	PG054LT	€ 61,64 € 36,70
	PUNTA PERIO Rimozione del biofilm sotto gengivale nelle tasche più profonde e nelle forcazioni. Trattamento degli spazi interdentali sopra e sottogengivali	P54R - PL5 - P25RE COMPATIBILE WOODPECKER - EMS - NSK/E	PG054RT	€ 61,64 € 36,70
	PUNTA PERIO Pulizia degli abutment implantari e dei restauri	IMPLANT P90- PI COMPATIBILE WOODPECKER - EMS	PG04KCPE Kit punta PG04CPE + 2 punte in PEEK+ chiave stringipunte	€ 123,27 € 74,90

ABLATORE U6 LED

Touch screen, led, senza dispenser, compatibile EMS®

U6 è l'ablattore piezoelettrico LED di ultima generazione firmato Woodpecker.

Design e alta tecnologia collocano l'ablattore U6 LED ai vertici della classifica dei migliori dispositivi piezoelettrici disponibili sul mercato. Controllo touch di precisione, resistente all'acqua, semplifica e velocizza la disinfezione dopo il trattamento.

Le oscillazioni sinusoidali modulate rispettano la struttura naturale dei denti, donando il massimo comfort al paziente.

Principali vantaggi

- Oscillazioni sinusoidali modulate per un trattamento più delicato per il paziente.
- Controllo touch di precisione, resistente all'acqua.
- Collegamento diretto alla rete idrica.
- Confortevole anche nelle applicazioni endodontiche.
- Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
- Manipolo autoclavabile, compatibile con inserti EMS®.
- 7 inserti in dotazione.

€ 608,88

€ 299,00

CODICE: AR602FO



APPROFONDISCI



ABLATORE UDS-K

Cieco, senza dispenser, compatibile EMS®



- Collegamento diretto alla rete idrica.
- Funzione Scaling.
- Manipolo autoclavabile compatibile con inserti EMS®.
- 5 inserti in dotazione.

€ 330,48

€ 197,00

CODICE: AR602N2

ABLATORE D3 LED

LED, senza dispenser, compatibile Satelec®



- Collegamento diretto alla rete idrica.
- Funzioni: Scaling e Perio.
- Manipolo led autoclavabile, compatibile con inserti Satelec®.
- 5 inserti in dotazione.

€ 330,48

€ 227,00

CODICE: AR705FO



ABLATORE UDS-E

Con dispenser, compatibile EMS®



- Indipendente dalla rete idrica grazie al dispenser in dotazione.
- Funzioni: Scaling, Perio e Endo.
- Manipolo autoclavabile compatibile con inserti EMS®.
- 8 inserti in dotazione.

€ 708,00

€ 349,00

CODICE: SCR602

€ 944,00

€ 459,00

CODICE: SCR602FO



MANIPOLI ABLATORI LED

COMPATIBILE EMS®

- 1 manipolo ablattore LED compatibile EMS®.

€ 226,56

€ 139,00

CODICE: M16AL



COMPATIBILE SATELEC®

- 1 manipolo ablattore LED compatibile Satelec®.

€ 226,56

€ 139,00

CODICE: M17SL



APPROFONDISCI



KIT CONVENIENZA MANIPOLI ABLATORE

COMPATIBILE EMS®

- 1 manipolo ablattore compatibile EMS® codice M16A.
- 3 inserti Scaling codice PG031.
- 3 chiavi stringipunte dinamometriche codice K14E.

€ 275,08

€ 176,00

CODICE: OFM16A

X3



COMPATIBILE SATELEC®

- 1 manipolo ablattore compatibile Satelec® codice M17S.
- 3 inserti Scaling codice PG079.
- 3 chiavi stringipunte dinamometriche codice K14E.

€ 290,08

€ 186,00

CODICE: OFM17S

X3



INSERTI TECNOMED ITALIA

Compatibili con i principali produttori di ablatori



Tecnomed Italia, sempre al passo coi tempi, propone una gamma completa di inserti che permettono una trasmissione ottimale degli ultrasuoni e garantiscono operazioni semplici e precise in ogni tipologia di intervento.

La qualità delle punte, marchiate Tecnomed Italia, è il risultato del know how acquisito in 20 anni di esperienza e di una partnership con un'azienda certificata dal TÜV Rheinland Group, che lavora nel rispetto delle normative ISO 9002 e ISO 13485.

Gli inserti sono compatibili con i principali produttori di ablatori presenti nel mercato e sono certificati CE0197.

In offerta...

	INDICAZIONI	COMPATIBILITÀ	CODICE	PREZZO
	PUNTA SCALING Per la rimozione del tartaro supragengivale in tutti i quadranti.	EMS® tipo A	PG031	€ 16,03 € 12,90
		SATELEC® tipo 1 NSK® tipo G1	PG079	€ 16,03 € 12,90
		MECTRON® tipo S1	PG068M	€ 27,22 € 19,90
		KaVo® PiezoLED® tipo 201	PG021K	€ 77,05 € 59,90
	PUNTA SCALING Per la rimozione del tartaro supragengivale e sottogengivale in tutti i quadranti.	EMS® tipo P	PG063	€ 21,16 € 16,90
	PUNTA SCALING Per la rimozione di grandi quantità di tartaro sopra gengivale.	KaVo® SONICflex® (fino a modello 2000) tipo 5 NSK® tipo S1	PG012K	€ 71,29 € 56,90
		KaVo® SONICflex® 2000/2003 tipo 5A	PG024K	€ 77,05 € 59,90
	PUNTA PERIO Per la rimozione del tartaro sottogengivale e da tasche parodontali profonde in tutti i quadranti.	EMS® tipo PS	PG062	€ 33,59 € 26,90
		SATELEC® tipo 1S	PG099	€ 35,65 € 27,90
		MECTRON® tipo P10	PG072M	€ 49,72 € 39,90

LAMPADA XPRESS

Polimerizzazione in 3 secondi



LAMPADA XPRESS R



LAMPADA XPEN



- Design moderno, ergonomiche, leggere, compatte.
- Corpo in alluminio per la massima durezza.
- Polimerizzazioni omogenee di qualità grazie ai 4 moduli led.
 - Ampio spettro d'assorbimento.
- Dimensioni ridotte della testina per raggiungere le zone di difficile accesso.
 - Lunga durata della batteria.

- Leggerezza ineguagliabile.
- Corpo in alluminio per la massima durezza.
- puntale a fibra ottica in vetro nero autoclavabile.
- Ampio spettro d'assorbimento.
- Lunga durata della batteria.

NOME PRODOTTO	PROGRAMMI / TEMPI	INTENSITÀ LUMINOSA PROGRAMMA HYPER	INTENSITÀ LUMINOSA PROGRAMMA RAMP	PESO MANIPOLO	CODICE	PREZZO
XPRESS	• Programma HYPER 3 / 3+3 secondi • Programma RAMP 10 / 20 secondi	3.500 mW/cm ²	1.500 mW/cm ²	216 grammi	PP3500W	€ 700,81 € 398,00
XPRESS R	• Programma RAMP 10 / 20 / 30 secondi	/	2.100 mW/cm ²	150 grammi	PP2100W	€ 589,57 € 335,00
XPEN	• Programma RAMP 10 / 20 / 30 secondi	/	1.100 mW/cm ²	113 grammi	PP1100W	€ 422,71 € 239,00

APPROFONDISCI

PROMO FLOWER CLEAN

Nebulizzatore Flower Clean + tanica 5l GREEN&CLEAN SK



L'OFFERTA COMPRENDE:

- Nebulizzatore elettrico Flower Clean 800 ml, lunghezza cavo 1,8 metri, 220VAC.
- Tanica da 5 litri di disinfettante superfici GREEN&CLEAN SK, METASYS.

€ 204,57
€ 99,00

CODICE: OF5072

PROMO FLOWER CLEAN WIRELESS

Nebulizzatore Flower Clean Wireless + tanica 5l GREEN&CLEAN SK



L'OFFERTA COMPRENDE:

- Nebulizzatore elettrico Flower Clean 800 ml, wireless.
- Tanica da 5 litri di disinfettante superfici GREEN&CLEAN SK, METASYS.

€ 322,70
€ 129,00


CODICE: OF5073

APPROFONDISCI



STERIL FAN F30 A PARETE

Installazione in soli 30 minuti!

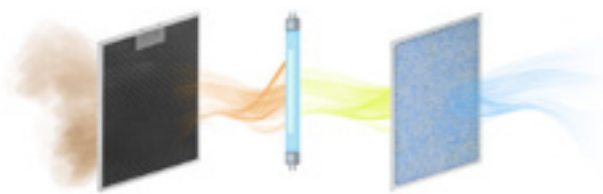

- Filtro primario**
Trattiene polvere e impurità
- UVC**
Luce germicida UVC Sterilizza l'aria
- TiO₂**
Filtro fotocatalizzatore Sterilizza l'aria

Principali caratteristiche:

- Sterilizzatore d'aria a parete con tecnologia UVGI.
- Copertura ambiente: 30m².
- Portata: 800 m³/h.
- Dimensioni: 1000x330x200 mm (lpxh).

€ 894,55
€ 468,00

CODICE: SFA2030F

STERIL FAN P60 PORTATILE SU RUOTE




Principali caratteristiche:


- Sterilizzatore d'aria portatile, a doppio stadio, con tecnologia UVGI.
- Copertura ambiente: 60m².
- Portata: 1500 m³/h.
- Dimensioni: 460x350x1100 mm (lpxh).

€ 1.985,89
€ 1.039,00

CODICE: SFA2060P

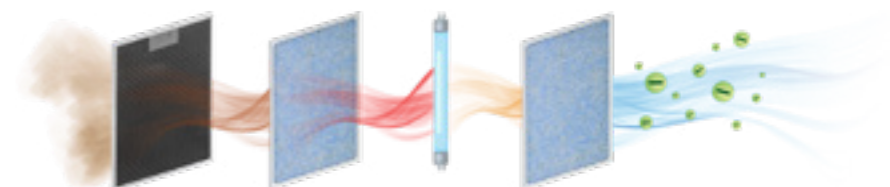

- STADIO SUPERIORE**
- Filtro primario**
Trattiene polvere e impurità
 - TiO₂**
Filtro fotocatalizzatore Sterilizza l'aria
 - UVC**
Luce germicida UVC Sterilizza l'aria
 - TiO₂**
Filtro fotocatalizzatore Sterilizza l'aria
 - Generatore di ioni negativi**
Sanifica l'aria

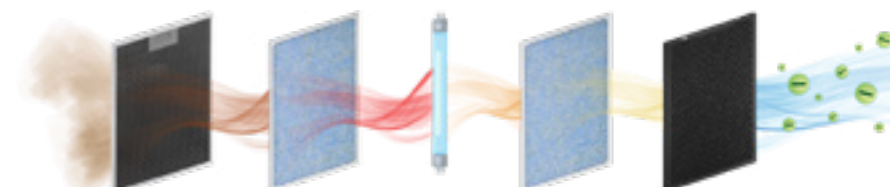


- STADIO INFERIORE**
- Filtro primario**
Trattiene polvere e impurità
 - TiO₂**
Filtro fotocatalizzatore Sterilizza l'aria
 - UVC**
Luce germicida UVC Sterilizza l'aria
 - TiO₂**
Filtro fotocatalizzatore Sterilizza l'aria
 - Filtro carboni**
Elimina gli odori
 - Generatore di ioni negativi**
Sanifica l'aria

APPROFONDISCI



STERIL FAN T60 A PAVIMENTO CON RUOTE

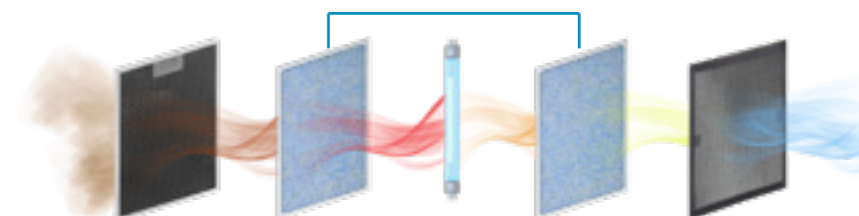

- Filtro primario**
Trattiene polvere e impurità
- +**
Filtro elettrostatico positivo Sterilizza l'aria
- UVC**
Luce germicida UVC Sterilizza l'aria
- Filtro elettrostatico negativo Sterilizza l'aria
- Filtro Hepa**
Trattiene i batteri

Principali caratteristiche:

- Sterilizzatore d'aria a pavimento con tecnologia UVGI, struttura in lamiera verniciata.
- Copertura ambiente: 60m².
- Portata: 1500 m³/h.
- Dimensioni: 550x420x850 mm (lpxh).

€ 3.757,09
€ 1.960,00

CODICE: SFA2060T

i METASYS

Un'idea innovativa, una rivoluzione!

Già all'inizio degli anni ottanta, il fondatore dell'azienda Bruno Pregenzer comprese i problemi derivanti dalla continua contaminazione dal mercurio nelle acque reflue.

In seguito, Pregenzer sviluppò il primo separatore d'amalgama: un apparecchio che separa e raccoglie l'amalgama contenente mercurio dall'acqua di scarico di riuniti dentali.

La visione di METASYS mirava ad una soluzione completa del problema dell'amalgama.

Nel giro di pochi anni, l'azienda METASYS, fondata nel 1988, divenne uno dei principali produttori mondiali di separatori d'amalgama e di sistemi di aspirazione centralizzati.

Da allora in poi, i costruttori più rinomati di riuniti dentali integrano i prodotti METASYS.

Dall'inizio del nuovo millennio, la filiale DENTAL ECO SERVICE offre in Europa ed oltreoceano un servizio completo di raccolta e riciclaggio per tutti i tipi di rifiuti d'amalgama contenenti mercurio.

Le prestazioni dei sistemi METASYS "EXCOM hybrid" sono sinonimo di tecnologia di aspirazione ad elevata potenza nel settore dentale.

L'elevata depressione costante dei sistemi di aspirazione METASYS offre un ambiente ottimale dove viene garantito il trattamento sicuro dei pazienti.

La versatilità dei prodotti EXCOM hybrid è senza uguali; possono essere infatti installati su sistemi ad anello umido e ad aria.



APPROFONDISCI

PROMO SISTEMI DI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATI

PER 1 RIUNITO
Con centralino

IVA AGEVOLATA
5%



- Per l'uso di 1 riunito al 100%.
- 300 litri/minuto.
- Con centralino.
- 63 dB(A).

€ 1.487,16
€ **1.059,00**

CODICE: 02010153C

PER 2 RIUNITI
Con centralino

IVA AGEVOLATA
5%



- Per l'uso contemporaneo di 2 riuniti al 100% o di 3 riuniti al 60% (2+1).
- 1100 litri/minuto.
- Con centralino.
- 65 dB(A).

€ 3.492,38
€ **2.390,00**

CODICE: DEJ.05U

PER 3/5 RIUNITI
Con centralino

IVA AGEVOLATA
5%



- Per l'uso contemporaneo di 4 riuniti al 100% o di 5 riuniti al 60% (4+1).
- 2100 litri/minuto.
- Con centralino.
- 65 dB(A).

€ 4.190,96
€ **2.880,00**

CODICE: 02010202

PER 2 RIUNITI
Senza essiccatore



- A secco per 2 riuniti.
- Senza essiccatore.
- 140 litri/minuto.
- Serbatoio 38 litri.
- 52 db.

€ 1.353,15
€ **689,00**

CODICE: 240TOV

PER 2 RIUNITI
Con essiccatore



- A secco per 2 riuniti.
- Con essiccatore.
- 140 litri/minuto.
- Serbatoio 38 litri.
- 53 db.

€ 2.273,89
€ **1.223,00**

CODICE: 240TOVEN

PER 3 RIUNITI
Con essiccatore



- A secco per 3 riuniti.
- Con essiccatore.
- 195 litri/minuto.
- Serbatoio 60 litri.
- 53 db.

€ 3.172,94
€ **1.699,00**

CODICE: 360TOVEN

PROMO COMPRESSORI MEDICALI

APPROFONDISCI

PER 1 RIUNITO
Senza essiccatore



- A secco per 1 riunito.
- Senza essiccatore.
- 70 litri/minuto.
- Serbatoio 25 litri.
- 52 db.

SOTTOCOSTO

€ 856,35
€ **413,00**

CODICE: 100TOV

PER 1+1 RIUNITO
Con essiccatore



- A secco per 1+1 riunito.
- Con essiccatore.
- 95 litri/minuto.
- Serbatoio 38 litri.
- 53 db.

€ 2.051,80
€ **1.099,00**

CODICE: 150TOVEN

I TUOI PUNTI DI RIFERIMENTO

ENRICO BIANI
Area Manager Liguria,
Piemonte, Valle D'Aosta
+39 392 95 24 664
e.biani@dentastec.it



GIANNI COLOMBO
Area Manager Veneto, Friuli Venezia
Giulia, Trentino Alto Adige, Lombardia
+39 331 54 71 016
g.colombo@dentastec.it



ROBERTO ALLEGRINI
Area Manager Emilia Romagna, Lazio,
Toscana, Umbria, Abruzzo, Marche
+39 349 05 59 356
r.allegri@dentastec.it



MAURIZIO D'AVALOS
Consulente d'area Molise,
Basilicata, Campania, Puglia
+39 348 22 25 289
m.davalos@dentastec.it



ANDREA PAOLINELLI
Country Manager
Area Manager
Sardegna, Sicilia, Calabria
+39 328 55 58 562
a.paolinelli@dentastec.it



FOLLOW US



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

LE OFFERTE SONO VALIDE FINO AL 30/09/2022 O SALVO ESAURIMENTO SCORTE. TUTTI GLI IMPORTI INDICATI SONO IVA ESCLUSA. EVENTUALI PRODOTTI IN OMAGGIO SONO DA INTENDERSI FINO A ESAURIMENTO SCORTE. I prezzi esposti o comunicati di tutti i prodotti (inclusi i prezzi offerta) possono subire variazioni senza preavviso per improvvisa variazione del costo della materia prima, dei costi di produzione o del costo di manodopera per quanto riguarda i prodotti di nostra fabbricazione, per improvvisa variazione dei costi all'origine, o variazioni repentine del tasso di cambio della nostra moneta, o per quanto riguarda i prodotti da noi commercializzati e/o importati. Per questo è doveroso, da parte del cliente, richiedere, al momento dell'ordine, le quotazioni aggiornate. La fatturazione avviene tramite il vostro fornitore abituale e quest'ultimo ha la facoltà di non aderire all'iniziativa degli omaggi. Le immagini sono indicative e non vincolanti.

Nonostante gli sforzi profusi da Tecnomed Italia srl affinché all'interno di queste offerte siano fornite informazioni accurate, è possibile la presenza di imprecisioni tecniche o errori tipografici. Errori di stampa di qualsiasi tipo non costituiscono motivo di reclamo. Tutto il materiale contenuto in questo catalogo è di proprietà di Tecnomed Italia e/o delle aziende rappresentate. Tecnomed Italia s.r.l. non è collegata in alcun modo con i marchi descritti. Tutti i marchi riportati appartengono ai legittimi proprietari; marchi di terzi, nomi di prodotti, nomi commerciali, nomi corporativi e società citati possono essere marchi di proprietà dei rispettivi titolari o marchi registrati d'altre società e sono stati utilizzati a puro scopo esplicativo e a beneficio del possessore, senza alcun fine di violazione dei diritti di Copyright vigenti. Per maggiori informazioni si invita a consultare la pagina "CONDIZIONI GENERALI" sul nostro sito internet www.dentastec.it. Per qualsiasi controversia è competente il Foro di Pesaro.